

⚠ Uprzejmości

1. Przed rozpoczęciem suszenia należy oczyścić aparat słuchowy z brudu i wilgoci.
2. Aby uzyskać lepszy efekt osuszania, odłącz dzwiękowied i otwórz komorę baterii, jeśli aparat słuchowy na to pozwala.
3. Przed rozpoczęciem pracy wyłącz aparat słuchowy, jeśli jest to model z akumulatorem i wbudowaną baterią.
4. Po zakończeniu suszenia wyłącz urządzenie Smart Dry.
5. Nie rozmontowuj produktu samodzielnie.
6. UV zaczyna działać dopiero po zamknięciu pokrywy Smart-Dry i przestaje działać po jej otwarciu. Ta konstrukcja ma na celu ochronę oczu. Długotrwałe wpatrywanie się w światło UV może uszkodzić oczy.
(Promieniowanie UV działa tylko w modelach 36TUV i 36TUV PRO.)

📄 Specyfikacja techniczna

Model	Inteligentne suszenie
Napięcie wejściowe	Napięcie stałe 5 V
Kontrola temperatury	40±1 °C
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	89mmX68mmX36mm
Długość fali	UVPRO-254nm, UVPRO-365nm
Środowisko pracy	temperatura 0-40°C, wilgotność względna powietrza <80% RH

Xiamen Melosound Technology Co.,Ltd

Dodaj: pokój 117A w rezydencji Chuang Ye, strefa zaawansowanych technologii
Xiamen Torch, #11 HuoJu East Road, dzielnica Huli, Xiamen, Fujian, Chiny
Telefon: 86-592-2218050 Strona internetowa: www.melosoundtech.com

Melodźwięk

Instrukcja obsługi Smart-Dry

Smart-Dry, elektroniczny osuszacz powietrza, to dobry wybór, jeśli chodzi o pielęgnację aparatów słuchowych i wkładek dousznych.


Cyfrowy układ scalony i czujnik temperatury w urządzeniu Smart-Dry stale mierzą i kontrolują temperaturę ogrzewania.

Modele z funkcją UV pomagają zabijać zarazki, grzyby i bakterie.

Prawidłowe i regularne stosowanie urządzenia Smart-Dry może wydłużyć żywotność aparatu słuchowego.



▶ Struktura produktu

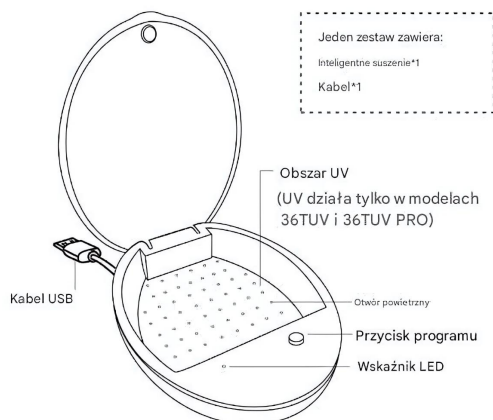

○ Instrukcja użytkowania

Przygotuj Smart-dry do zasilania: podłącz końcówkę Micro USB kabla do Smart Dry, podłącz kabel do adaptera, a następnie podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.

Proszę przeczytać poniższą instrukcję obsługi, zależnie od zakupionego modelu:

Model 3T

- Włącz Smart-Dry 3T, naciśnij przycisk programu, aby włączyć, migające niebieskie światło oznacza, że włączono 3 godziny suszenia. Zobacysz stałe niebieskie światło po zakończeniu suszenia.
- Naciśnij program jeszcze raz, a Smart-dry 3T wyłączy się.

Model 36T

- Włącz Smart-dry 36T, naciśnij przycisk programu, aby włączyć, migające niebieskie światło oznacza, że włączono 3 godziny suszenia. Po zakończeniu suszenia zobacysz stałe niebieskie światło.
- Jeśli wolisz przełączyć się na suszenie przez 6 godzin, naciśnij przycisk programu, a kontrolka zacznie migać na zielono.
- Gdy migające światło zmieni się na światło stabilne, proces suszenia jest zakończony. Naciśnij program, aby wyłączyć i wyjąć aparat słuchowy.

Modele 36TUV/36TUV Pro

- Włącz Smart-dry, naciśnij przycisk programu, aby włączyć, migające czerwone i niebieskie światło oznacza, że 0,5 godziny UV + 3 godziny suszenia jest włączone. Po zakończeniu UV automatycznie rozpocznie się 3 godziny suszenia, zobaczysz migające niebieskie światło. Po zakończeniu 3 godzin suszenia niebieskie światło zmieni się na stabilne.
- Jeśli wolisz, aby Twój aparat słuchowy był suchy przez 6 godzin, naciśnij przycisk programu jeszcze raz, migające czerwone i migające zielone światło oznacza 0,5 godziny UV + 6 godzin suszenia. Zielony kolor stanie się stabilny po zakończeniu suszenia.
- Naciśnij program po raz trzeci, aby wyłączyć funkcję Smart-dry.

Poniższa tabela może pomóc w zrozumieniu wskazania świetlnego:

Funkcjonować	Model	3T	36T	36TUV	36TUVPro
3H suche		Niebieski	Niebieski	—	—
6H na suchu		—	Zielony	—	—
0,5H UV+3H suche		—	—	Czerwony + Niebieski	Czerwony + Niebieski
0,5H UV + 6H suche		—	—	Czerwony + Zielony	Czerwony + Zielony

* Migające światło = działa

* Stabilne światło = wykończenie