

Instrukcja obsługi słuchawek do aparatu słuchowego z przewodnictwem kostnym


Model: HA32

1. Akcesoria

- A, Słuchawki-----1 szt.  
B, kabel ładujący typu C -----1 szt.

2. Funkcja

- 1) Mikrofon  
2) Kontrolka działania  
3) Port ładowania  
4) Głośność „+”  
5) Włączanie/wyłączanie zasilania  
6) Głośność „-”

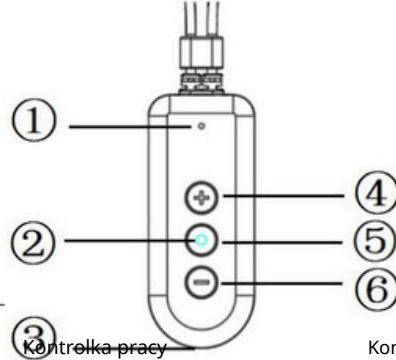

3. Operacja

| Funkcjonować                       | Przycisk | Działanie                                      | Kontrolka pracy   | Komunikaty głosowe                   |
|------------------------------------|----------|--|---|--------------------------------------|
| 1 Włączanie/wyłączanie zasilania   |          | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3sekundy | Włączanie: białe światło włączone<br>Wyłączanie zasilania: białe światło wyłączone    |                                      |
| 2 Tom +                            |          | Kliknij głośność „+”                           |   | „DI”<br>Maksymalna głośność: „DI-DI” |
| 3 Tom-                             |          | Kliknij głośność „-”                           |   | „DI”<br>Minimalna głośność: „DI-DI”  |
| 4 Niski poziom naładowania baterii |          | Automatyczne wyłączenie                        | Białe światło migające  |                                      |
| 5 Ładowanie                        |          | Korzystanie z kabla ładującego                 | Ładowanie: pomarańczowa lampka włączona<br>W pełni naładowany: białe światło włączone |                                      |

4. Jak używać

(1) Instrukcja noszenia

Krok 1: Zawieś słuchawki na szyi.

Krok 2: Umieść urządzenie odbierające dźwięk na klatce piersiowej lub przypnij je do ubrania.

Krok 3: Załóż słuchawki i umieść wibratory przewodzące kostno przed uszami, jak pokazano na rysunku.  
w na poniższym obrazku.



(2) Instrukcja obsługi:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć słuchawki.
- Dostosuj głośność do pożądanego poziomu za pomocą regulatora głośności, aby aktywować aparat słuchowy.

(3) Instrukcja ładowania

- Po włączeniu zasilania
- Po podłączeniu kabla ładującego słuchawki automatycznie się wyłączą i rozpocznie się ładowanie.

- Po wyłączeniu zasilania,  
podłączenie kabla ładującego spowoduje rozpoczęcie ładowania.
- Wskaźniki ładowania -  
Pomarańczowa dioda LED świeci światłem ciągłym podczas ładowania.  
- Dioda LED świeci na biało po pełnym naładowaniu.

#### 5. Środki ostrożności

- (1) Po pierwszym włączeniu słuchawek mikrofon może wychwytywać dźwięki otoczenia i wzmacniać je za pomocą wibratora, powodując wycie. Wycie ustanie automatycznie po prawidłowym włożeniu słuchawek do uszu.
- (2) Jeśli nie słycać dźwięku, sprawdź, czy bateria w słuchawkach jest rozładowana. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, Na sygnalizację tego faktu będzie migać biała lampka kontrolna.
- (3) Jeśli nie słycać dźwięku, upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na minimum. Słuchawki zapamiętują ostatnie ustawienie głośności, aby wyeliminować konieczność wielokrotnej regulacji.
- (4) Jeśli dźwięk jest niewyraźny, dostosuj położenie słuchawek w kanale słuchowym, ponieważ uszy każdego z nas mogą być zatkane. kształt odbytu zmienia się aż do uzyskania optymalnej jakości dźwięku.

#### 6. Specyfikacje Typ

aparatu słuchowego: Przenoszenie dźwięku przez przewodnictwo kostne  
Typ baterii: Bateria polimerowa 200 mAh  
Czas pracy baterii: Ok. 20 godzin  
Czas ładowania: Ok. 2 godzin  
Typ głośnika: Głośnik z przewodnictwem kostnym  
Pasma przenoszenia: 300 Hz–8 kHz  
Maksymalny wyjściowy SPL:  $30 \pm 3$  dB  
Średnie pełne wzmocnienie:  $35 \pm 3$  dB  
Wymiary mikrofonu:  $2,75 \times 1,85 \times 1,0$  mm  
Czułość mikrofonu:  $-38 \pm 1$  dB  
Waga: 52 g  
Kabel ładujący: 30 cm