


SOUNDWEAR®

Bring Your Hearing Back to Life

SOUNDWEAR®

Bring Your Hearing Back to Life

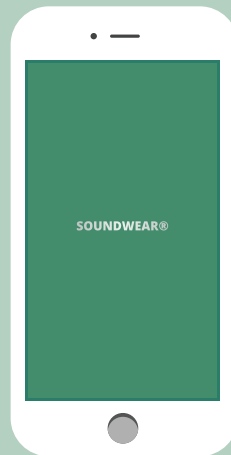

Aplikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI

 Android

 App Store

SOUNDWEAR

Główną funkcją aplikacji SOUNDWEAR jest dostosowanie profilu ustawień do preferencji użytkownika, aby zapewnić dopasowane i komfortowe słyszenie.



UWAGA: Aplikacja jest stale rozwijana, dlatego jej wygląd i działanie mogą różnić się od opisanych w tej instrukcji. W takim przypadku postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że:

- Bluetooth w telefonie jest włączony.
- Aparat słuchowy jest **WŁĄCZONY** i ma nową baterię lub pełne naładowanie.
- Aparaty znajdują się w odległości do około 1,5 m od telefonu.
- Telefon spełnia wymagania: iOS 9 lub nowszy, iPhone 5 lub nowszy; Android 6 lub nowszy, ekran co najmniej 4 cale.

SPOSÓB 1

Wyszukaj SOUNDWEAR w App Store lub Google Play.



SPOSÓB 2

Uruchom aparat w telefonie.

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



WYMAGANIA: iOS 9 LUB NOWSZY, iPhone 5 LUB NOWSZY; ANDROID 6.0 LUB NOWSZY.

Łączenie z aplikacją

Włącz Bluetooth



Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony.

SPOSÓB 1:

Przesuń palcem od dołu ekranu w górę, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij ikony Bluetooth (iOS).

SPOSÓB 2:



Otwórz „Ustawienia” telefonu, a następnie wybierz „Bluetooth”.

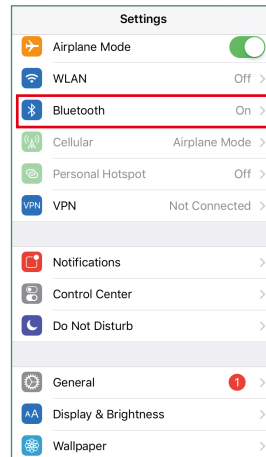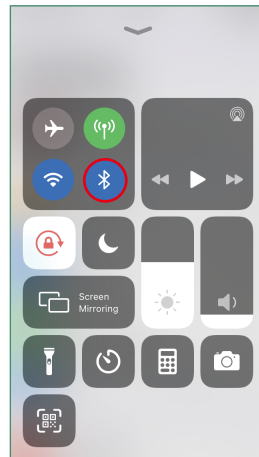

Łączenie z aplikacją

Wybór wyglądu aplikacji

Jeśli znasz wersję 1.x, możesz wybrać „Old style” (stary wygląd), aby korzystać z interfejsu podobnego do wcześniejszej wersji.

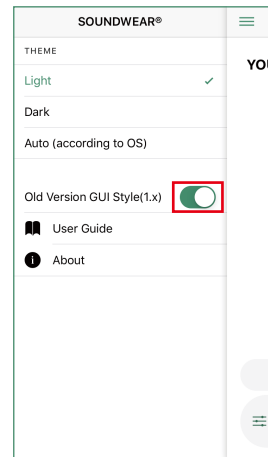
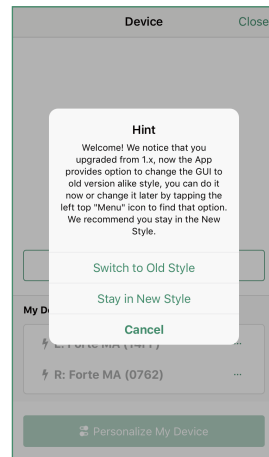


Łączenie z aplikacją

Wyszukiwanie

Wyszukaj urządzenie, wykonując pokazane kroki.



UWAGA: Modele przedstawione na ilustracji służą wyłącznie jako przykłady.

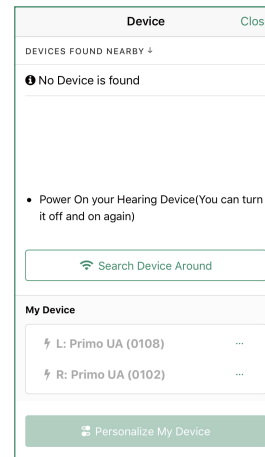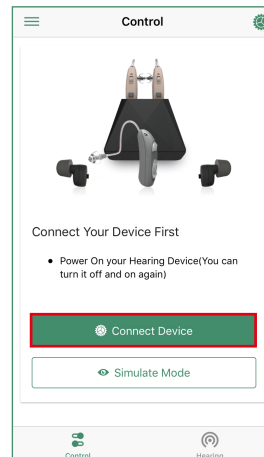

Łączenie z aplikacją

Połączenie



Połącz urządzenia pojedynczo, przypisując każde do odpowiedniego ucha.

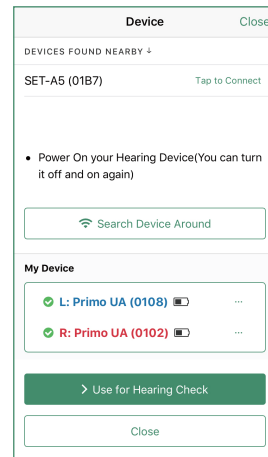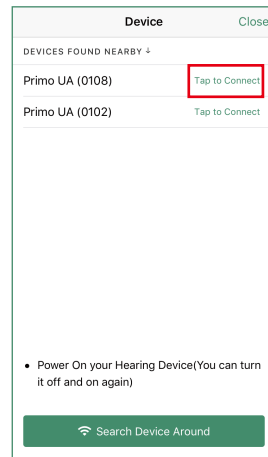

Łączenie z aplikacją

Dodatkowe ustawienia


Aby przejść do dodatkowych ustawień, wybierz symbol „...” po prawej stronie pozycji połączzonego urządzenia.

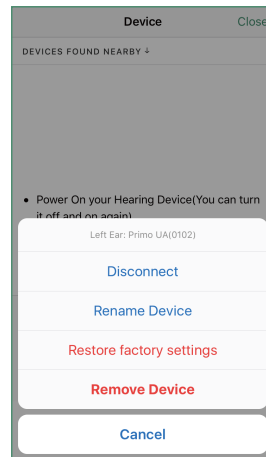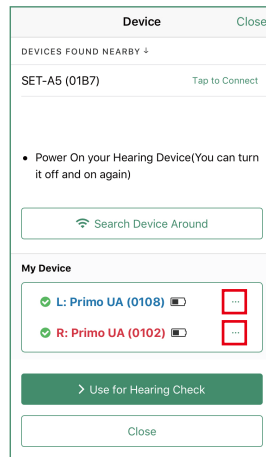

Włączanie i wyłączanie

Połączenie


Wybierz odpowiednie urządzenie i przesunąć przełącznik w prawo lub w lewo, aby je włączyć albo wyłączyć. Funkcja jest dostępna w wybranych modelach.

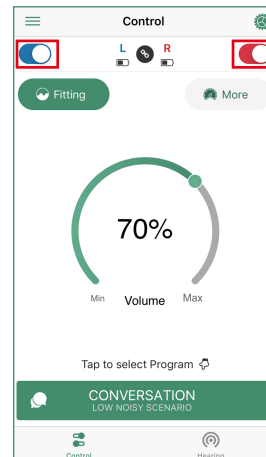

Dopasowanie


Wybierz „Fitting” (dopasowanie), aby samodzielnie dopasować aparat słuchowy.

Wskazówka: Możesz najpierw wypróbować ustawienia początkowe, a sprawdzenie słuchu wykonać później.

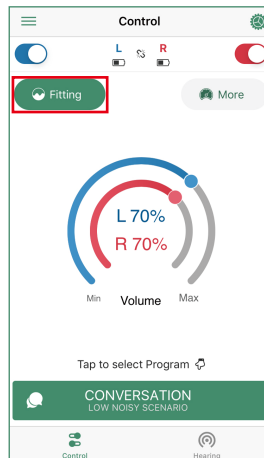

Dopasowanie


Znajdź ciche miejsce, aby wykonać dopasowanie („Fitting”) lub sprawdzenie słuchu („Hearing check”).

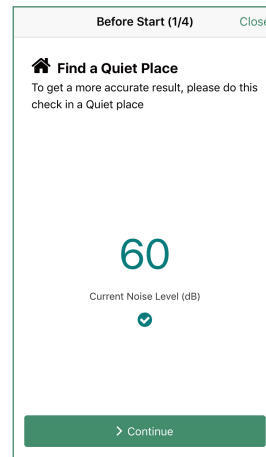

Dopasowanie


Postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji.
Dla każdej testowanej częstotliwości określ,
czy słyszysz odtwarzany dźwięk.

Przy każdej częstotliwości wybierz „Yes”
(tak) albo „No” (nie).

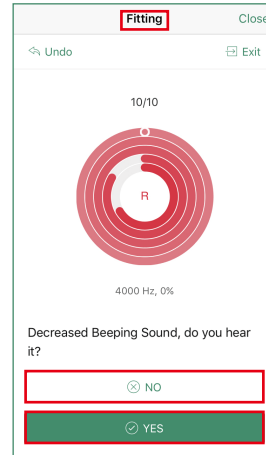



Sprawdzenie słuchu

Po zakończeniu aplikacja wyświetli wynik sprawdzenia słuchu.

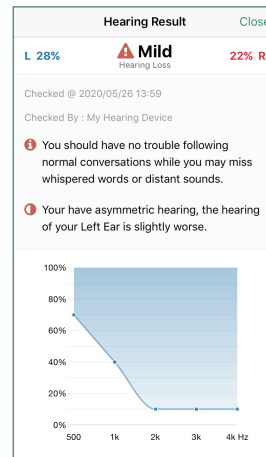


Sprawdzenie słuchu

Możesz wykorzystać uzyskany wynik do ponownego dopasowania urządzenia. Wykonaj kroki pokazane w aplikacji.

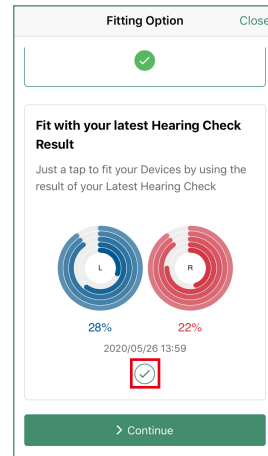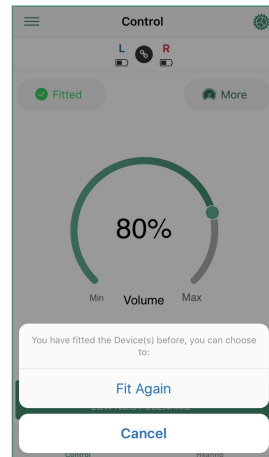

Ustawienia dźwięku

Dotknij „Control” (sterowanie) w lewym dolnym rogu ekranu głównego, aby otworzyć ustawienia dźwięku. Możesz tutaj zmieniać tryby/programy, głośność oraz wzmocnienie pasm częstotliwości.


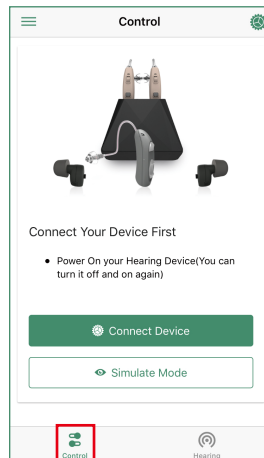


Sterowanie

Tryby / programy

Wybierz tryb słuchania odpowiedni do swoich potrzeb, dotykając programu w aplikacji. Domyślnie aplikacja zmienia program jednocześnie w lewym i prawym aparacie.

Wskazówka: Przycisk zmiany programu na aparacie pozwala zmieniać tryb osobno dla każdego urządzenia.

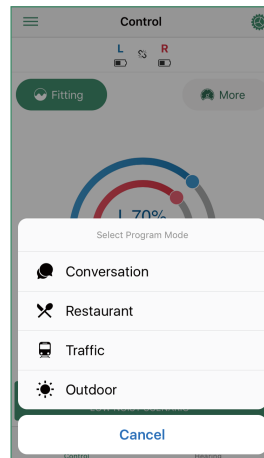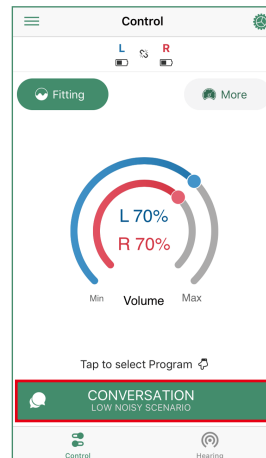


Sterowanie

Głośność

Reguluj głośność aparatów, przesuwając palcem po okręgu.

Włącz połączenie regulatorów (ikona połączonych ogniw), aby ustawiać tę samą głośność w obu aparatach. Rozłącz regulatory, aby ustawiać głośność dla każdego aparatu osobno.

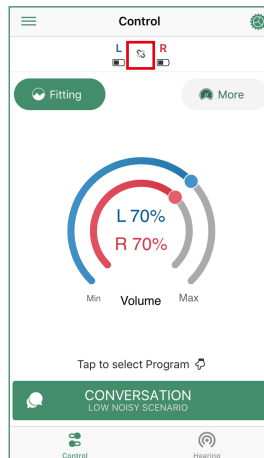

Sterowanie



Regulacja

Dotknij „BAND” i przesuwaj suwaki odpowiednich częstotliwości.

Funkcja BAND pozwala dostosować wzmocnienie dźwięku w poszczególnych pasmach częstotliwości.

Funkcja COMPRESS przenosi dźwięki do innego zakresu częstotliwości, aby poprawić słyszalność dźwięków mowy.

Funkcja COMPRESS jest dostępna w wybranych modelach.

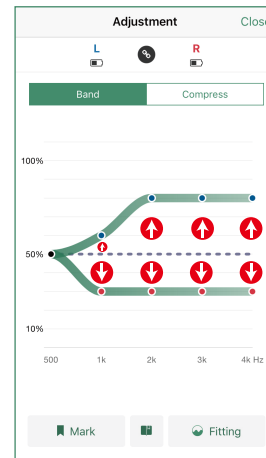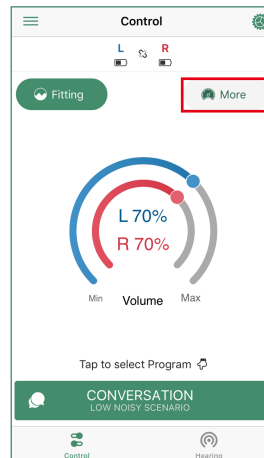

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Problem techniczny z telefonem	Uruchom telefon ponownie.
Niezgodność aplikacji z telefonem	Sprawdź wersję systemu iOS / Android.
Nieaktualna aplikacja	Zaktualizuj aplikację.
Nieprawidłowo włożona bateria	Włóż baterię ponownie lub wymień ją na nową.
Nieznana przyczyna problemu	Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.