

Słuchawki z aparatem słuchowym z przewodnictwem kostnym

Instrukcja obsługi

Model: BDS-101




1. Akcesoria do produktu

A. Słuchawki do aparatu słuchowego z przewodnictwem kostnym ----- 1 szt.

B. Magnetyczny kabel ładujący USB -----1 szt.

2. Diagram funkcji produktu

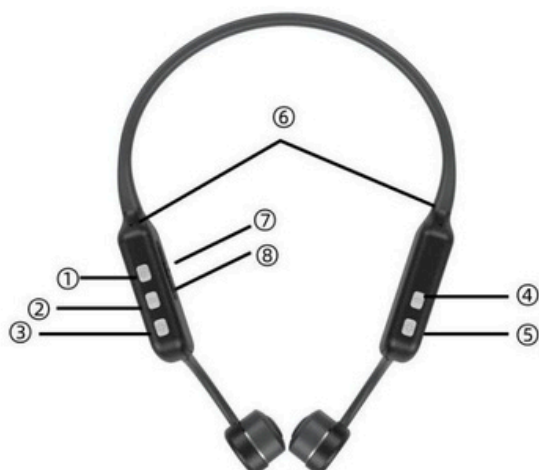

Przycisk włączania/wyłączania zasilania

Lewy przycisk głośności „-”

Lewy przycisk głośności „+”

Prawy przycisk głośności „-”


Prawy przycisk głośności „+”

Mikrofon

Lampka kontrolna

Port ładowania magnetycznego

3. Operacje przycisków

	Funkcjonować	Obsługa przycisków	Wskaźnik LED	Komunikat głosowy
1	Włącz zasilanie	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przycisk przez 3sekundy	Biały wskaźnik światło się włącza	"Włącz zasilanie"
2	Wyłącz zasilanie	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przycisk przez 3sekundy	Biały wskaźnik światło gaśnie	"Wyłącz"
3	Zwiększenie głośności	„+” Naciśnij „+” raz, aby zwiększyć głośność	/	Każde naciśnięcie: „Zwiększenie głośności” Maksymalna głośność: „Maksymalna” tom "
4	Tom W dół	„-” Naciśnij raz „-”, aby zmniejszyć głośność	/	Każde naciśnięcie: „Głośność w dół” Minimalna głośność: „Minimalna tom"

5	Niski Bateria		Słuchawki się wyłączają automatycznie	Biały wskaźnik błyski światła (bateria <30%)	Komunikat głosowy „Niski bateria”
6	Ładowanie		Ładowanie za pomocą kabel magnetyczny	Niski poziom baterii ładowanie: pomarańczowy światło stałe. W pełni naładowany: Białe światło stały.	/

4. Obsługa i użytkowanie

Kroki noszenia:

Krok 1: Załóż opaskę i umieść wibrator przewodzący kostno przed uchem, jak pokazano na rysunku 1.

Krok 2: Włącz i używaj.



Rysunek 1

5. Środki ostrożności

(1) Po pierwszym włączeniu słuchawek mikrofon może wychwycić

dźwięki otoczenia, które są wzmacniane przez wibrator, powodując sprzężenie zwrotne/wycie. To zatrzyma się automatycznie po odłączeniu słuchawek.

prawidłowo noszone.

(2) Jeśli nie słyszysz żadnego dźwięku, sprawdź, czy bateria słuchawek jest naładowana. rozładowana. Kontrolka zacznie migać, gdy bateria będzie słaba.

(3) Jeśli nie słyszysz żadnego dźwięku, sprawdź, czy głośność słuchawek jest ustawiona na minimalny poziom.

(4) Jeśli dźwięk jest niewyraźny, dostosuj położenie słuchawek

Twój kanał słuchowy, ponieważ kształt ucha każdego człowieka jest inny, aż znajdziesz miejsce, w którym dźwięk jest najczystszy.

6. Specyfikacje

Zasilanie: 5V 0,5A

Pojemność baterii: 3,7 V180 mAh

Czas ładowania: 2 godziny

Czas użytkowania: 20 godzin

Maksymalne wzmocnienie: 23 dB

Zakres częstotliwości: 350 Hz - 4300 Hz

Zniekształcenia harmoniczne: <3%