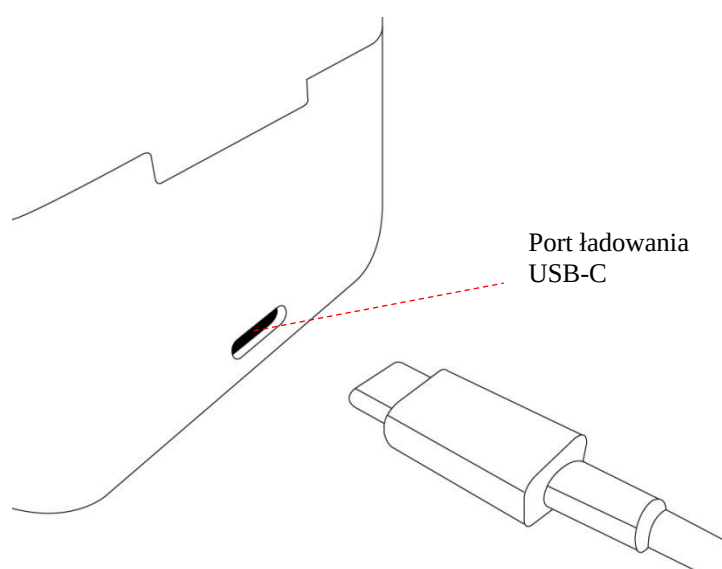
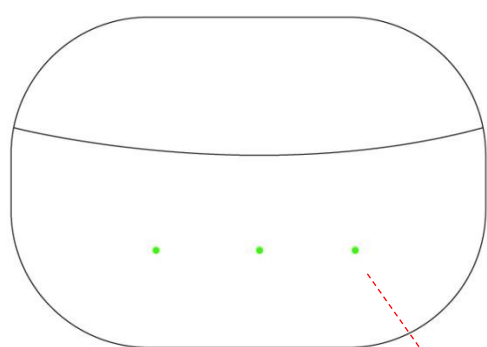
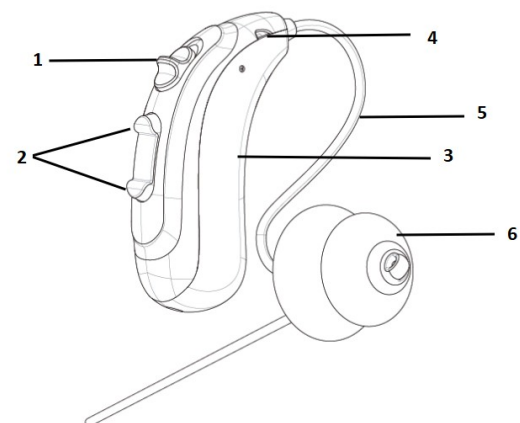


Wzmacniacz dźwięku serii E z aplikacją
Instrukcja obsługi

«Budowa urządzenia»

1. Włącznik / wyłącznik
2. Głośność / program
3. Urządzenie
4. Mikrofon
5. Przewód
6. Nasadka douszna



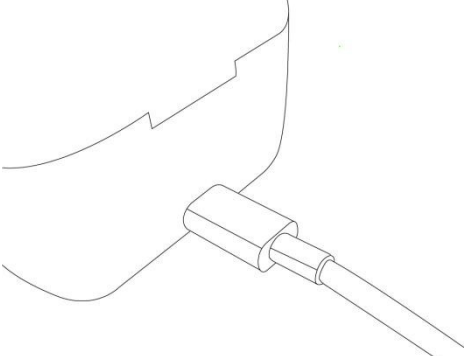
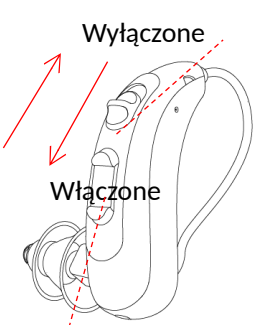
Kontrolka ładowania
Świeci przez 10 s: poziom energii powyżej 32%.
Szybko miga przez 10 s: poniżej 32%. Naładuj etui.
Po podłączeniu zasilania pulsuje podczas ładowania. Po
naładowaniu świeci stale.

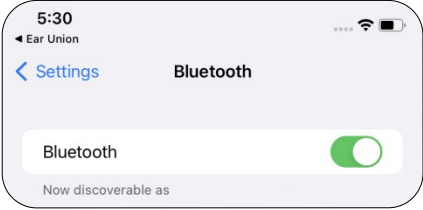
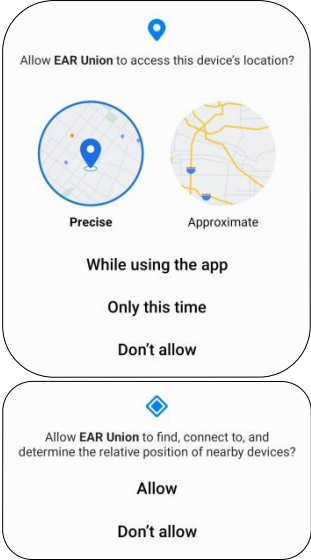
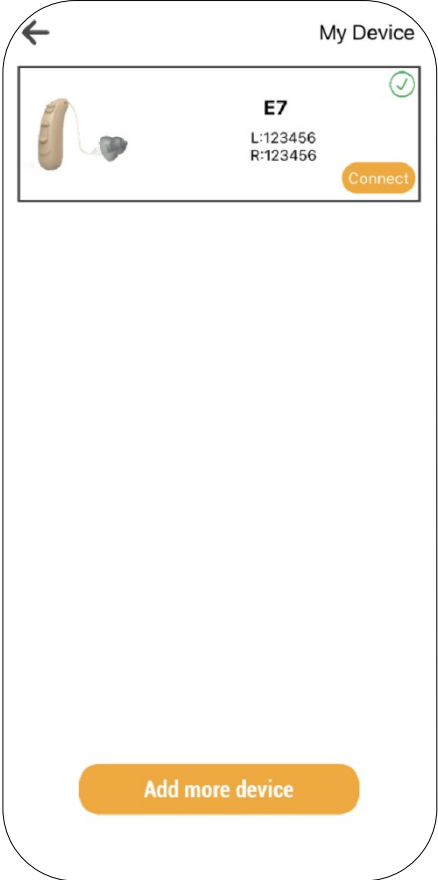
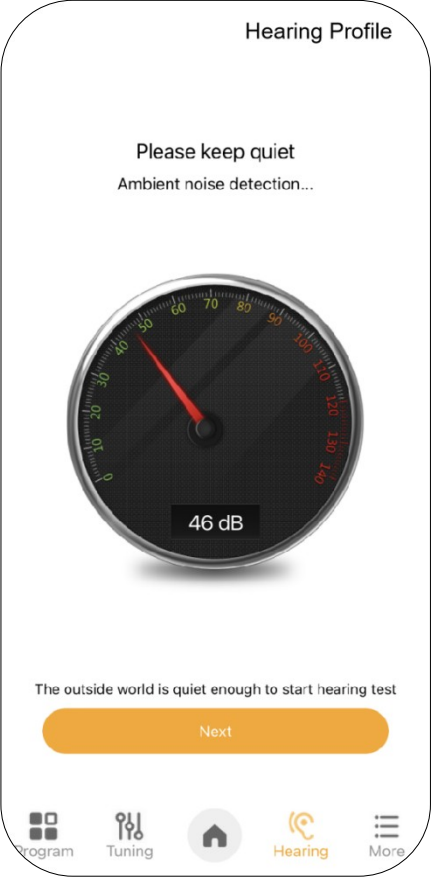
Znaczenie kontrolek ładowania			
Warunki pracy		Kontrolki	Stan
Etui: Bez zasilania	Urządzenia poza etui.	○ ○ ○	Etui jest w trybie czuwania.
	Urządzenia w etui. Po otwarciu etui.	○ ○ ○	Urządzenie nie ładuje się lub etui jest rozładowane.
		● ○ ●	Podczas ładowania urządzeń kontrolki migają przez 8 s, po czym gasną.
		● ○ ●	Po naładowaniu urządzeń kontrolki świecą przez 10 s, po czym gasną.
		● ○ ●	
Etui: Podłączone do zasilania	Urządzenia poza etui.	○ ● ○	Trwa ładowanie etui. Kontrolka miga.
		○ ● ○	Etui jest naładowane. Kontrolka świeci stale.
	Urządzenia w etui.	● ○ ●	Trwa ładowanie urządzeń. Kontrolki migają.
		● ○ ●	Urządzenia są naładowane. Kontrolki świecą stale.
		● ○ ●	
		● ● ●	Urządzenia i etui są naładowane. Wszystkie kontrolki świecą stale.

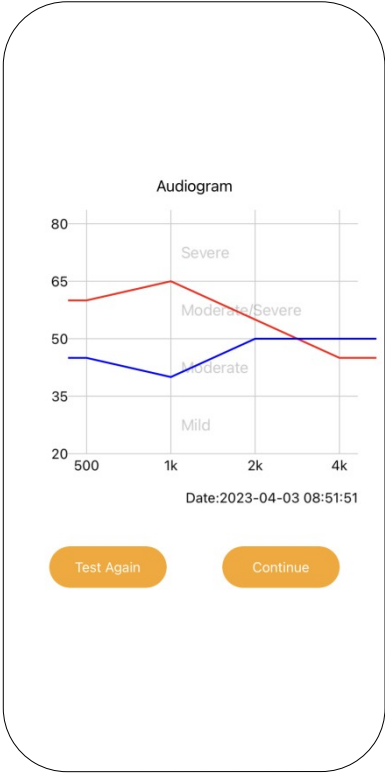
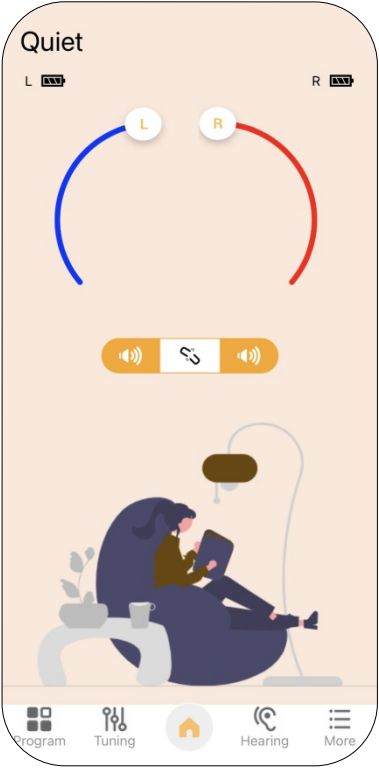
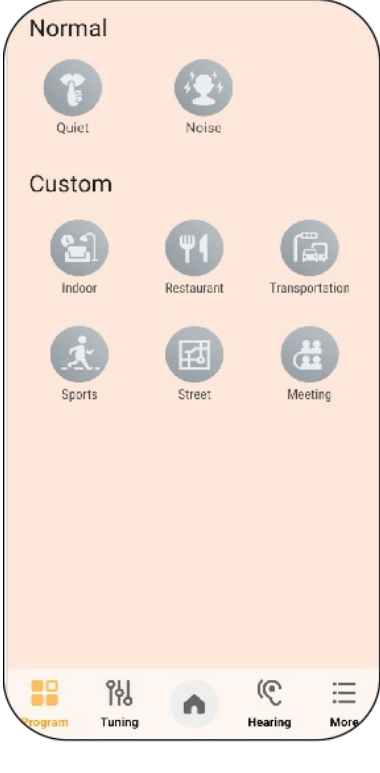
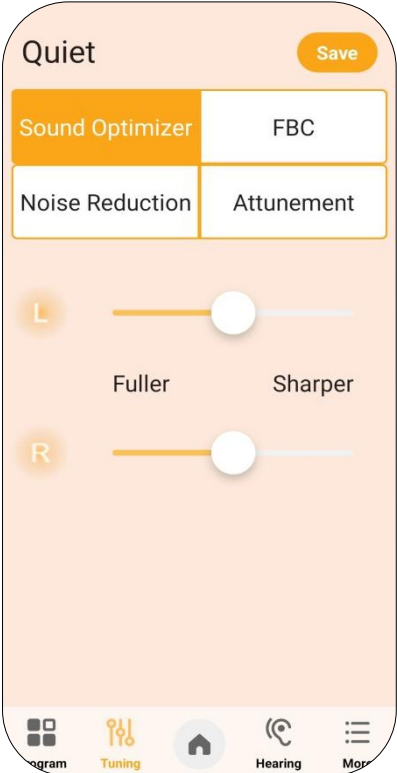
«Programy dźwięku»

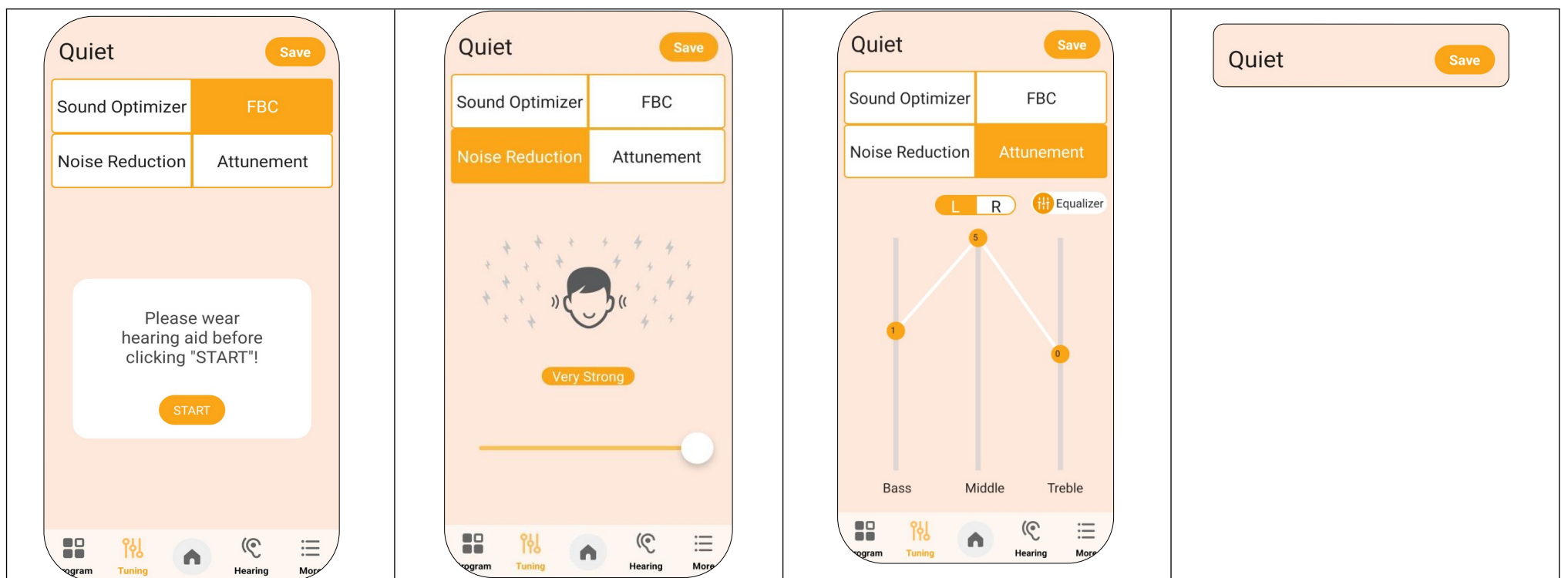
Program	Opis
P1	Ciche otoczenie
P2	Hałaśliwe otoczenie
P3	Własny

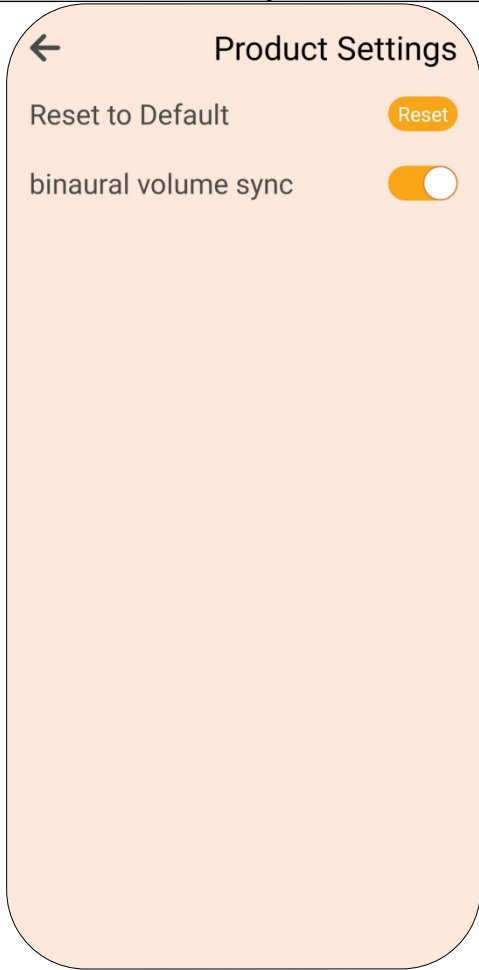
«Obsługa krok po kroku»

<p>Krok 1</p> <p>Pierwsze uruchomienie: podłącz przewód USB-C do portu ładowania i źródła zasilania, aby wybudzić urządzenie.</p> <p>Przed pierwszym użyciem ładuj przez 3 godziny, aż kontrolki będą świecić stale.</p>	<p>Krok 2</p> <p>Włączanie i wyłączanie: po naładowaniu wyjmij urządzenie z etui i przesun włącznik w dół. Przed odłożeniem do etui przesun włącznik w górę, aby wyłączyć urządzenie.</p>	<p>Krok 3</p> <p>Prawidłowo załóż urządzenia. Dobierz odpowiedni rozmiar nasadek dousznych, aby zapobiec pischczeniu.</p>	<p>Krok 4</p> <p>Pobierz aplikację: zeskanuj kod QR.</p>
	<div><p>Wyłączone</p><p>Włączone</p></div> <p>Krótkie naciśnięcie zmienia głośność. Przytrzymaj przycisk ponad 3 s i puść. Program zmieni się, co potwierdzi sygnał dźwiękowy.</p>	<p>Włącznik</p> 	

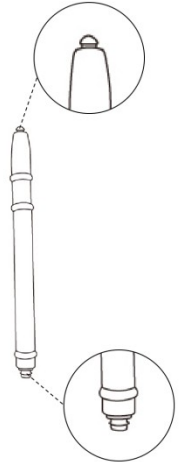
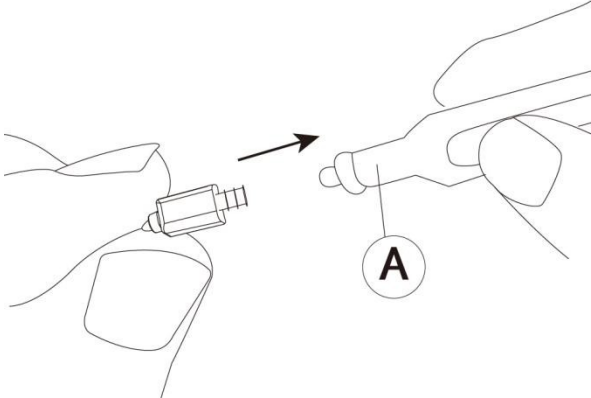
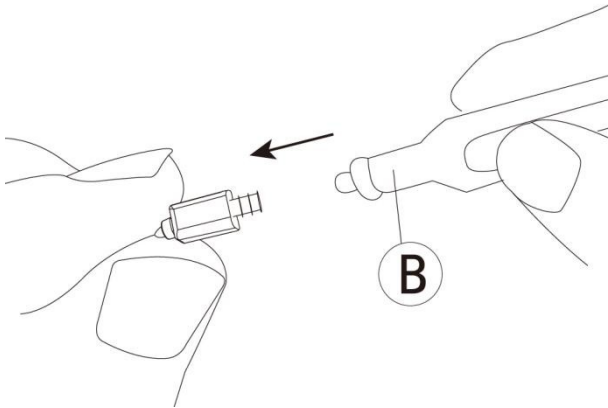
<p>Krok 5</p> <p>Bluetooth: włącz Bluetooth w ustawieniach telefonu, a następnie wróć do aplikacji EAR Union.</p>	<p>Krok 6</p> <p>Uprawnienia aplikacji: zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji telefonu. (Wymagane w systemie Android).</p>	<p>Krok 7</p> <p>Wyszukiwanie urządzeń: aplikacja wyszuka je automatycznie. Wybierz „Connect” (Połącz) przy urządzeniu. Jeśli go nie ma, wybierz „Add more devices” (Dodaj urządzenia).</p>	<p>Krok 8</p> <p>Personalizacja dźwięku: po połączeniu otworzy się profil słuchu. Wykonaj test zgodnie z instrukcjami aplikacji. Jeśli pominiesz ten krok, wybierz „Hearing” (Słuch) na ekranie głównym, aby wykonać test później.</p>
			

<p>Krok 9</p> <p>Automatyczne dopasowanie: po teście wybierz „Continue” (Dalej). Aplikacja dostosuje kompensację słuchu do wyników testu i wróci do ekranu głównego.</p>	<p>Krok 10</p> <p>Głośność: na ekranie głównym ustaw głośność osobno dla każdego urządzenia lub dla obu jednocześnie. Uwaga: podczas połączenia z aplikacją przyciski urządzenia są nieaktywne.</p>	<p>Krok 11</p> <p>Wybór programu: dostępne są 2 programy domyślne i 1 dodatkowy, wybierany spośród 6. Każdy program jest automatycznie dopasowywany do profilu słuchu.</p>	<p>Krok 12</p> <p>Sound Optimizer (Brzmienie): ustaw ogólne wzmocnienie niskich i wysokich częstotliwości. Fuller — więcej niskich tonów; głębszy, pełniejszy dźwięk. Sharper — więcej wysokich tonów; ostrzejszy, głośniejszy dźwięk.</p>
			
<p>Krok 13</p> <p>FBC (Sprzężenie zwrotne): jeśli urządzenia piszczą, uruchom ponowną kalibrację układu redukcji sprzężeń. Uwaga: prawidłowo założź urządzenia. Dźwięk testowy jest dość głośny. Poczekaj na koniec kalibracji.</p>	<p>Krok 14</p> <p>Noise Reduction (Redukcja hałasu): dostępne są 4 poziomy. Jeśli otoczenie jest zbyt głośne, przesun suwak, aby zwiększyć redukcję hałasu.</p>	<p>Krok 15</p> <p>Attunement (Regulacja pasm): ustaw wzmocnienie wybranych częstotliwości. Bass — tony niskie; Middle — średnie; Treble — wysokie. Wybierz „Equalizer” (Korektor), aby uzyskać dostęp do regulacji 16 pasm.</p>	<p>Krok 16</p> <p>Zapis: po regulacji wybierz „Save” (Zapisz), aby przesłać ustawienia do urządzeń.</p>



<p>Krok 17</p> <p>Ustawienia urządzenia</p> <p>Ustawienia domyślne: wybierz „Reset” (Resetuj), aby usunąć ustawienia profilu słuchu i przywrócić ustawienia początkowe.</p> <p>Synchronizacja głośności: lewe i prawe urządzenie wymieniają dane przez Bluetooth, aby synchronizować ustawienia. Jeśli chcesz osobno zmieniać głośność i program przyciskami każdego urządzenia, wyłącz funkcję „Binaural Volume Sync”.</p>			
			

«Wymiana filtra woskowego»

Krok 1 Otwórz opakowanie i wyjmij narzędzie do wymiany filtra. Pomarańczowa końcówka (A) służy do wyjmowania filtra. Biała końcówka (B) zawiera nowy filtr.	Krok 2 Wyjmij zużyty filtr: jedną ręką trzymaj narzędzie, a drugą urządzenie. Wsuń końcówkę A w zużyty filtr i wyciągnij go.	Krok 3 Założ nowy filtr: wsuń filtr na końcówce B w otwór wylotu dźwięku i osadź go pewnie. Wycofaj narzędzie, pozostawiając filtr na miejscu.
<p>A: wyjmowanie</p>  <p>B: nowy filtr</p>		

Rozwiązywanie problemów

1. Przyciski urządzenia nie działają.
Podczas połączenia z aplikacją przyciski urządzenia są nieaktywne. Rozłącz urządzenie z aplikacją, a następnie wyłącz je i włącz ponownie.
2. Urządzenie nie łączy się z aplikacją.
Sprawdź, czy telefon ma system Android w wersji wyższej niż 8 lub iOS w wersji wyższej niż 11 oraz czy Bluetooth jest włączony. Powtórz kroki 4–7, aby połączyć urządzenie z aplikacją.
3. Urządzenie było połączone z aplikacją, ale teraz nie łączy się.
Sposób 1: wyłącz urządzenie i włóż je do etui. Następnie wyjmij je i włącz ponownie.
Sposób 2: usuń zapisane połączenie w EAR Union, ponownie wyszukaj urządzenie i uruchom je ponownie.
Sposób 3: usuń zapisane połączenie w EAR Union i zamknij wszystkie aplikacje w telefonie. Otwórz EAR Union, uruchom urządzenie ponownie i powtórz wyszukiwanie.